

## 警 語

以下症狀及部位禁止使用本產品

- 1.以下人士：植入心臟起搏器或除顫器、患有心臟疾病、勞損性背痛、孕婦或分娩後不久、骨折、骨質疏鬆、關節病患者、患有惡性腫瘤、皮膚有創傷者或患有濕疹等禁止使用。
- 2.敏感區域：頭部、面部、頸椎、脊椎、關節、肌肉覆蓋較少的靠近骨骼的位置（如：脛骨、足背、手背等）、瘀青和疼痛部位，皆禁止使用本產品，若有身體不適者請於使用前諮詢醫生的意見。

## 注意事項

1. 在未詳細閱讀本說明書前，請勿使用本產品。
2. 本產品不用於醫療用途，僅提供個人和家庭按摩使用。
3. 使用本產品前，請完全展開充電線，請勿與其他大功率電器共用同一電源。
4. 清潔保養及移動產品時，務必將充電連接線拔下。
5. 過度使用本產品會導致機體過熱和縮短產品壽命，重複使用時，須讓產品冷卻一段時間後再使用。
6. 請勿站立或直接坐在本產品上，以免發生跌倒事故。
7. 使用時請勿覆蓋機身，以免溫度過高導致故障，並禁止手指、頭髮或其他身體部位靠近震動頭軸心，以避免被夾住。請勿將產品暴露在高溫處或發熱設備的周圍，如火源、陽光直射處、微波爐。
8. 請勿在浴室等潮濕環境下使用，請勿把產品浸入水中及其他液體，以避免引起短路或觸電。
9. 請勿將任何物品放入產品的插孔中，並定期清除產品及充電器上的灰塵。
10. 不使用時應先關閉電源開關，並拔掉充電線，請勿用濕手拔插充電器。

11. 本產品不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包括孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
12. 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
13. 產品禁止改裝，非專業人員請勿擅自打開機體及維修。
14. 需要擦拭本產品時，請待本機冷卻後，再使用乾淨軟布和中性洗滌劑，切勿使用汽油、酒精、香蕉水等溶劑，同時須確保任何液體不得進入本機內部。
15. 產品顏色及外觀以實際出貨為主。
16. 僅提供標示於電器之超低安全電壓。

※充電時建議選用電流輸出為2A(含)以上之充電器，可降低本產品充電時間。避免無法充電，請勿選用電流輸出為0.5A以下之充電器。

|                 |   |
|-----------------|---|
| <b>正確電池回收方式</b> | —在電器報廢前應取出電池<br>—應安全地丟棄電池。<br>—取出電池前電器應切斷電源 |
|-----------------|---|

|  |  |                      |                      |  |  |  |
|--|--|----------------------|----------------------|--|--|--|
| 設備名稱：筋膜槍<br>Equipment name   | 型號（型式）：FG-63<br>Type designation (Type)                      |                      |                      |  |  |  |
| 單元   | 限用物質及其化學符號<br>Restricted substances and its chemical symbols |                      |                      |  |  |  |
|  | 鉛<br>Lead<br>(Pb)  | 汞<br>Mercury<br>(Hg) | 鎘<br>Cadmium<br>(Cd) | 六價鉻<br>Hexavalent<br>chromium<br>(Cr <sup>VI</sup> ) | 多溴聯苯<br>Polybrominated<br>biphenyls<br>(PBB) | 多溴二苯醚<br>Polybrominated<br>diphenyl ethers<br>(PBDE) |
| 內部配線   | ○  | ○                    | ○                    | ○  | ○  | ○  |
| 印刷電路板  | ○  | ○                    | ○                    | ○  | ○  | ○  |
| 按摩馬達   | ○  | ○                    | ○                    | ○  | ○  | ○  |
| 外殼塑料   | ○  | ○                    | ○                    | ○  | ○  | ○  |
| 備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。<br>Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.<br>備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。<br>Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.<br>備考3. “—”係指該項限用物質為排除項目。<br>Note 3: The “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption. |  |                      |                      |  |  |  |

## 保證書

感謝您選購本公司產品，請妥善保管保證書，以確保得到完善的售後服務。

- 自購買日起一年內，在正常使用狀況下，如發生故障，本公司提供維修服務；若係天災或外力破壞、改裝等人為損壞，恕不免費服務。
  - 超過上項所訂期限，保固外之商品如需更換零件，本公司的收維修零件成本費。如經檢測報價後不維修，則酌收檢測費。
  - 產品送修則需自行負擔運費。
  - 配件屬耗材，如充電線、刷頭、噴頭、刀片、濾心、清潔刷、收納袋等，不屬於保固範圍，如需更換須請另行購買。
  - 電池屬耗材，保固6個月，若超過上述期限，需酌收維修及檢測費用。
  - 燈管屬耗材，保固3個月，並建議每年定期更換，若超過上述期限，需酌收維修及檢測費用。
  - 產品若停產超過3年或無維修零件，則不提供維修服務。
- **本保證書，請詳細填寫購買日期及加蓋購買店章，始可生效。**  
· **也可依據購買憑證（發票、收據等）正本或影本。**  
· **或產品主機之製造日期起算15個月。**

|      |        |  |  |
|------|--------|--|--|
| 姓名   |        |  |  |
| 地址   |        |  |  |
| 購買日期 | 電話     |  |  |
| 經銷商  |        |  |  |
|      | (蓋章有效) |  |  |

**耐嘉股份有限公司  
全台服務電話**

總公司/新竹市東區經國路一段187號  
電話/03-5396966  
台北課/新北市新莊區中正路653之2號2樓  
電話/02-29040088  
新竹課/新竹市東區經國路一段187號  
電話/03-5152309  
台中課/台中市東區東英十三街13號  
電話/04-22119966  
台南課/台南市永康區東橋二街119號  
電話/06-2038170  
高雄課/高雄市鼓山區文衡路333號10樓B棟  
電話/07-5547258

消費者服務專線：03-5396627

# KINYO


## 6 段式肌肉舒緩筋膜槍 FG-63




## 使用說明書 OPERATING INSTRUCTIONS

為了讓您在產品使用上更方便順利，請詳讀本產品使用說明書，以免發生使用不當的狀況。

## 產品說明

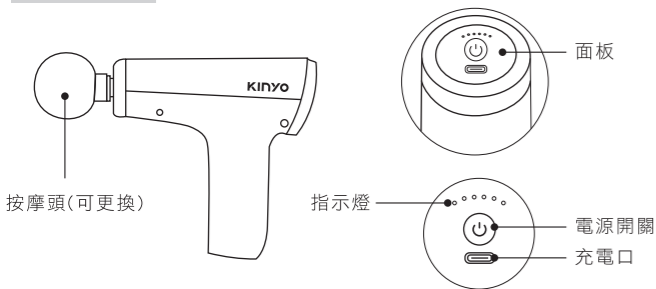

## 安裝方式

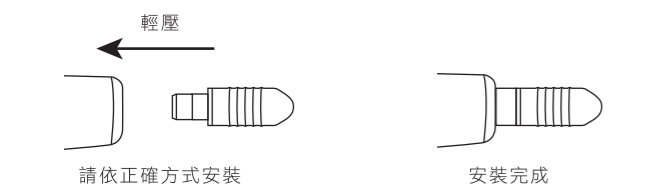

## 按摩頭說明

|                     |                 |                  |              |
|---------------------|-----------------|------------------|--------------|
|                     |                 |                  |              |
| 圓頭                  | 錐頭              | 扁頭               | Y型頭          |
| 適用於按摩各個肌肉部位，手、背部、臀部 | 適用於深層組織，如手掌、足底。 | 適用於各個肌肉部位的放鬆、塑形。 | 適用於按摩頸部、跟腱處。 |

## 產品規格

品名：筋膜槍  
型號：FG-63  
額定電壓：5V=2A  
電池規格：2200mAh鋰電池  
產品重量：449g±10g

安全關機時間：15分鐘  
產品尺寸：W150xH145xD55mm  
(不含按摩頭)  
材質：ABS塑膠  
配件：按摩頭x 4、充電線

## 產品使用

### 開/關機

- 長按開關鍵約三秒開機
- 長按開關鍵約三秒關機

### 檔位調節

- 開機初始檔位為一檔
- 按壓一次則會增加一檔
- 最大檔位為六檔，當到達六檔時再點擊一次會回到一檔。

※注意：為了保護骨骼及肌群，請避免長時間定點按摩而造成損傷。

## 使用提醒

本產品採用改良升級版馬達，在不同檔位下，略微施力重壓可瞬間產生大於該檔位的震速，此功能設計用途為：提供使用者更多元的力道選擇，可根據個人適應度和需求做更細緻深層的力度調整。

## 充電方式

請使用本產品附的USB充電線充電

- 1.將充電線插入充電器(另購)並連接到家用電源。
- 2.將另一端Type-C充電線連接到產品主體的充電孔即可充電。
- 3.充電時指示燈藍燈閃爍，依電量顯示1-6格燈，充飽電藍燈全亮。
- 4.充電時間大約為5-6小時，充電完成後可使用6-7小時(使用時間依檔位不同而定)。

※為確保使用安全，充電時產品無法啟動。

## 清潔保養

- 1.請待本機冷卻後，再用中性清潔劑及軟布擦拭，禁止使用腐蝕性的清潔劑，如汽油、酒精、香蕉水等溶劑，同時確保任何液體不得進入本機內部。
- 2.長時間存放或旅行時，請將產品放在原包裝內保持乾燥。

## 故障處理

如果按照以下方法仍無法解決，請諮詢購買的銷售店家或到指定的售後維修點進行維修。

| 故障處理      | 處理方法   |
|-----------|--|
| 筋膜槍不運作    | <ul style="list-style-type: none"><li>· 檢查電源插頭/USB插頭/主體充電孔是否插牢，請確實插牢。</li><li>· 檢查電源插座是否有電。</li><li>· 檢查開關是否打開，請確實開啟開關。</li></ul>              |
| 筋膜槍突然停止運作 | <ul style="list-style-type: none"><li>· 為確保使用安全，產品持續使用約15分鐘，會自動關機。</li><li>· 再按一次按鍵即可開機，但請勿長時間按摩同一部位。</li><li>· 當機身發熱時，請先冷卻一段時間後再使用。</li></ul> |
| 使用時按摩頭脫落  | <ul style="list-style-type: none"><li>· 開機前請先確認按摩頭有安裝確實，插入筋膜槍前方的圓孔底部。</li></ul>  |

### ※緊急注意事項

使用中如有冒煙、異味、起火燃燒的狀況，請立即停止使用本產品，並請立即與本公司客服聯繫。