

感謝您選購 KINYO 健康沖牙機

傳統口腔護理：傳統的刷牙方式不能輕易地去除隱藏的食物殘渣和有害細菌，牙線只能抵達牙齦下方有限的區域。


KINYO 健康沖牙機能有效清除食物殘渣和有害細菌。

KINYO


經典美型隨身沖牙機

說明書

IR-1008

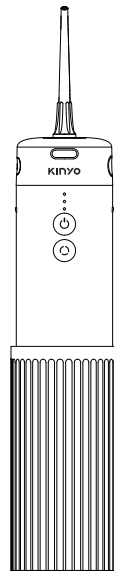

Portable Oral Irrigator

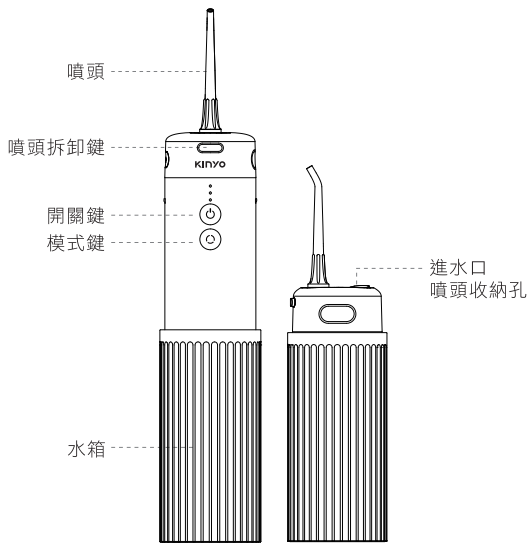

感謝您選購本公司產品，請妥善保管保證書，以確保得到完善的售後服務。

- 自購買日起一年內，在正常使用狀況下，如發生故障，本公司提供維修服務；若係天災或外力破壞、改裝等人為損壞，恕不免費服務。
- 超過上項所訂期限，保固外之商品如需更換零件，本公司酌收維修零件成本費。如經檢測報價後不維修，則酌收檢測費。
- 產品送修則需自行負擔運費。
- 配件屬耗材，如充電線、刷頭、噴頭、刀片、濾心、清潔劑、收納袋等，不屬於保固範圍，如需更換須請另行購買。
- 電池屬耗材，保固6個月，若超過上述期限，需酌收維修及檢測費用。
- 燈管屬耗材，保固3個月，並建議每年定期更換，若超過上述期限，需酌收維修及檢測費用。
- 產品若停產超過3年或無維修零件，則不提供維修服務。
- **本保證書，請詳細填寫購買日期及加蓋購買店章，始可生效。**
也可依據購買憑證（發票、收據等）正本或影本。
或產品主機之製造日期起算15個月。

姓名			
地址			
購買日期		電話	
經銷商			

(蓋章有效)

**耐嘉股份有限公司
全台服務電話**

總公司/新竹市東區經國路一段187號
電話:03-5396966
台北/新北市新莊區中正路653之2號2樓
電話:02-29040088
新竹/新竹市東區經國路一段187號
電話:03-5152309
台中/台中市東區東英十三街13號
電話:04-22119966
台南/台南市永康區東橋二街119號
電話:06-2038170
高雄/高雄市鼓山區文信路333號10樓8樓
電話:07-5547258

消費者服務專線：03-5396627

電源供應與充電說明

設備裝置	指示燈顏色與狀態描述
電量顯示	長按開關鍵顯示剩餘電量
低電量提醒	三個白燈同時閃爍時，表示設備需及時充電
充電中	相應電量的白燈閃爍
充電完成	三個白燈同時長亮，表示產品充滿電

常見問題和解決方案


問題	原因	處理方法
噴頭與旋鈕之間發生漏水	噴頭未安裝到位	將噴頭裝入到位
	噴頭固定座內的密封圈破損	聯繫銷售商
水箱漏水	密封圈破損	聯繫銷售商
壓力不夠	低電壓使用	充滿電後使用
設備無法啟動	低電壓使用	充滿電後使用
產品不出水	過濾網堵塞	聯繫銷售商

如果按照以上方法還不能解決，請諮詢購買的銷售店或到指定的售後維修點進行維修。


產品配件




標準
噴頭
x2

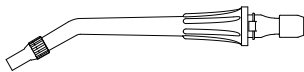

牙套
專用
噴頭
x1

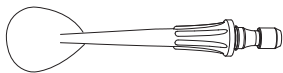

舌刮
噴頭
x1

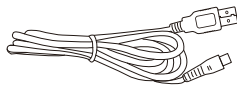

Type-C
USB
充電線
x1



收納袋
x1


使用說明

啟動工作

- 非常重要！第一次使用前，請將設備充滿電。
- 注意：充電時，請勿使用產品。

安裝噴頭

將噴頭插入主機頂端空位，當發出“喀嗒聲”，即安裝成功。

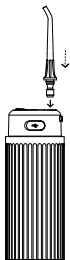

卸載噴頭


如需更換噴頭，請按住噴頭拆卸鍵，然後將噴頭取出。



水箱加水

- 下拉水箱至卡住，此時主機底部與水箱貼合處為水箱最高水位位置（MAX線），打開頂部進水口注水。

※注意：請確保往水箱注水時的設備是關閉狀態。

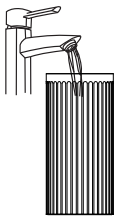

- 請勿將本產品用於沖牙以外的用途，以免對產品造成損壞或導致意外。
- 本產品含有內置充電電池，請勿將其投入火中加熱或者在高溫處充電、使用或放置。
- 本產品因涉及個人衛生健康，除商品本身固有之瑕疵品外，一經拆封，恕不接受退貨。
- 配件屬消耗性零件，如噴頭等，恕不屬於保固範圍，如需更換須另行購買。
- 產品顏色及外觀以實際出貨為主。

產品規格

額定電壓：DC 3.7V

消耗功率：5W

額定電流：1A

電池規格：內建鋰電池1100mAh

充電時間：約3-4小時

續航時間：充滿電約可使用15天(以每天2次，每次2分鐘計算)

防水等級：IPX7

水箱容量：200ml

出水定時：2分鐘

出水壓力：30-110 psi

出水速度：150ml/分

脈衝水柱：1250-1650次/分

產品重量：240g

產品尺寸：Φ56 x H230mm (含噴頭)

包裝尺寸：W85xH175xD85mm

產品材質：ABS塑膠

配件：標準噴頭x2、牙套噴頭x1、舌刮噴頭x1


收納袋*1、充電線x1

*請務必使用通過BSMI認證的5V 1A充電器(需另購)

- 剛做過口腔手術、牙周手術或者正在治療牙齒的人，在使用本產品前請先諮詢醫生。
- 請勿將噴頭對準眼睛、耳朵和喉嚨，不要將產品用在清洗口腔外的地方。
- 如果舌頭有外傷，請勿使用。
- 當使用本產品感到口腔異常時，請立即停止使用。
- 請勿自行拆解本機，否則可能引起安全事故。
- 若有故障現象發生，請盡速拔除此裝置，並諮詢經銷商或本公司客服專線。
- 請勿在水箱注入清水外的液體或化學劑(例如：漱口水)。
- 為防止燙傷，請勿注入溫度40度以上的清水。
- 使用前請確實遵從說明書內使用方式及注意事項與警語。
- 若對此產品感到有問題，請諮詢牙科醫師再繼續使用。
- 請先將噴頭放入口中再開電源；使用後，請先關閉電源再從口中取出，避免水飛濺。
- 請避免長時間噴同一部位，以免可能導致牙齒或牙齦受傷。
- 為確保個人衛生，請勿與別人共用噴頭。
- 使用本產品前要檢查是否有明顯的損壞，如有損壞或者機器嚴重摔落請勿使用。
- 請將本產品置於兒童無法觸及的位置，且兒童應在相應指導監督之下使用，避免兒童擅自使用本產品，以免導致意外。
- 請勿踩踏、重摔或者對本產品施加強烈撞擊，以免對產品造成損壞或導致意外。

啟動設備與選擇模式

- 1.開/關機：短按開關鍵開機進入工作狀態，再次短按開機。
- 2.短按模式鍵，進行4檔模式切換循環：
輕柔-強勁-按摩-變頻。(模式燈號如圖式說明)
【方法一】：先按開關鍵後，再按模式鍵選擇模式。
【方法二】：先按模式鍵後選擇模式，再按開關鍵啟動設備。

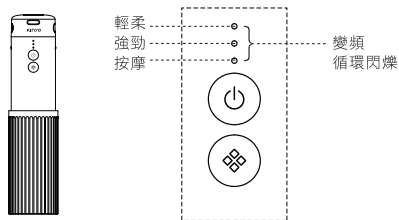


- 3.特殊功能：自訂水壓強弱
 - 當切換至【變頻】模式時，3個燈號循環閃爍。
 - 此時長按模式鍵後，進入變頻模式設定，即可調整水壓強弱，共分為6段。
 - 燈號由上而下閃爍，對應水壓強度由弱至強，請短按模式鍵，鎖定喜歡的強度，下次使用時即可於模式切換時快速使用。


※注意:連續三個循環不操作將退出設置。

推薦技巧

1. 向下傾斜將噴頭放置嘴裡，將噴頭對準牙齒後開啟設備。
2. 噴射水流同牙床成90度角，微閉嘴唇，以免水流側射。

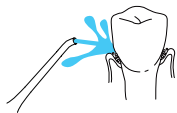

3. 為達到最佳效果，請先從臼齒部位(後牙)開始，朝著門牙方向開始清洗。使噴射頭沿著牙床線滑動清理，並在齒間做短暫停留。直到牙齦周圍及牙齒之間都清理乾淨。

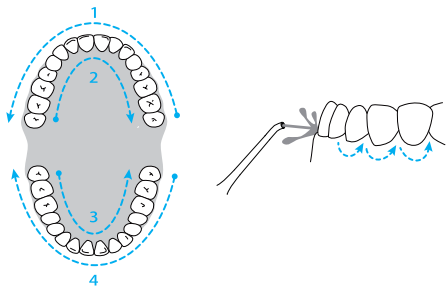


拆裝示例

使用完畢

關閉電源設備，打開進水口上蓋，或是拉下水箱至完全脫離機身後，倒出水箱中殘餘液體。


最後再將水箱裝回機身。

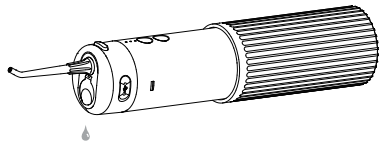

拆卸水箱

一手抓住產品機身，一手向下拉動並旋轉水箱，至水箱脫離機身。

※拆卸後可用常溫清水清潔水箱，請勿使用清潔劑。使用後再將水箱裝回機身。

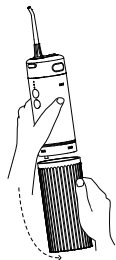

電源供應

- 為了最大化電池的使用壽命，請在電量不足時立即充電。
- 長期不使用的話，建議2-3個月充電一次。
- 請勿邊充電邊使用。